



Voor de patiënt

Afname-instructies: Bloed in de stoelgang

Afname-instructie voor de patiënt

Bloed in de stoelgang

Belangrijk alvorens u begint:

- De test wordt gebruikt om na te gaan of er (onzichtbare) spoorjes bloed in de ontlasting aanwezig zijn, afkomstig van het maag-darm kanaal.
- Neem de test **niet af tijdens de menstruatieperiode** of als u last heeft van **bloedende aambeien**.
- De stoelgang mag **niet verontreinigd zijn met urine of water** uit het toilet.

Het staalafnamebuisje




Controleer de houdbaarheidsdatum. Vraag een nieuwe afnamekit, als de vervaldatum is overschreden. Schrijf uw **naam** op het etiket van het staalafnamebuisje of kleef er een **mutualiteitsvignet** op.



Vang uw stoelgang op met behulp van het **opvangpapier** (Faeces Collection Device). Volg hiervoor de instructies op het opvangpapier.



Draai het groene dopje van het busje. Aan de groene dop zit een staafje.

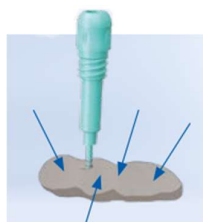

Prik met het staafje op 4 verschillende plaatsen in uw stoelgang.



Kijk of de groeven volledig bedekt zijn (zonder overmaat). Te veel ontlasting zorgt ervoor dat de test niet goed kan uitgevoerd worden.



Steek het staafje terug in het busje en draai stevig vast.

Na dichtdrukken niet meer openen!



Steek het staal terug in het zakje.

Breng het staal binnen bij uw labo of uw arts.

Na afsluiten in de frigo bewaren (max. 7 dagen)